


CARACTERISTICAS GENERALES

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 2 puertas laterales con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puertas con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Programación de Tiempo y Temperatura
- Control Digital PID EcoLogic con Autotuning
- Doble visor de temperatura Interna y Parámetro programado
- Decrece el tiempo a partir de llegar a la temperatura programada
- Rango de temperatura de 50 a 200 °C
- Indicadores lumínicos de Resistencia, Alarma y Autotuning
- Exactitud: al grado centígrado
- Conexión a 220 Vac. 50-60Hz.
- Garantía 1 año. Service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de Garantía a 2 años gratuita
- Accesorios: 2 estantes tipo rejilla regulables (6 posiciones)



Medidas Internas
70 x 50 x 50

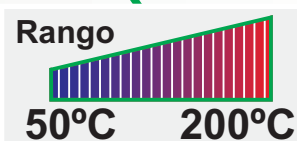

Estufa de Esterilización
Automática Digital

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Interior	
Frente x Alto x Fondo en cm	70 x 50 x 50
Volumen Interno (en Litros)	175
Exterior	
Frente x Fondo x Alto de Estufa	86 x 62 x 87
Frente x Fondo x Alto con Embalaje	94 x 68 x 91
Otros	
Consumo Wats	1760
Peso en Kg Neto	53
Peso en Kg con Embalaje	74

- ☺ Alta performance para uso continuo
- ☺ Exclusivo Control Digital EcoLogic
- ☺ Fácil manejo del Control Digital
- ☺ Autotuning optimizado de fábrica
- ☺ Bajo Consumo
- ☺ Doble Garantía
- ☺ Service gratuito de por vida

www.sanjor.com.ar