


CARACTERISTICAS GENERALES

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 1 puerta lateral con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Termómetro empotrado en el frente
- Termorregulador hidráulico a capilar
- Indicadores lumínicos de Resistencia y funcionamiento
- Reloj de corte de 3 horas con alarma y función llave
- Rango de temperatura de 30 °C a 200 °C
- Rango óptimo de trabajo de 90 °C a 200 °C
- Exactitud: +- 1,4% del valor final de temperatura
- Uniformidad: +- 1,5% del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60Hz
- Garantía 1 año. Service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de Garantía (en la Web)
- Accesorios: 1 estante tipo rejilla regulable (2 posiciones)



Medidas Internas
45 x 25 x 25

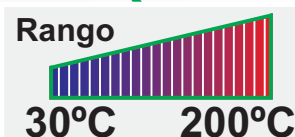

Estufa de Esterilización
Automática

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Interior

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Frente x Alto x Fondo en cm | 45 x 25 x 25 |
| Volumen Interno (en Litros) | 28 |

Exterior

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Frente x Fondo x Alto de Estufa | 56 x 35 x 49 |
| Frente x Fondo x Alto con Embalaje | 60 x 40 x 54 |

Otros

| | |
|-------------------------|-----|
| Consumo Wats | 880 |
| Peso en Kg Neto | 16 |
| Peso en Kg con Embalaje | 17 |

- 😊 Alta performance para uso continuo
- 😊 Bajo consumo
- 😊 Doble Garantía
- 😊 Service gratuito de por vida

www.sanjor.com.ar