

CULTIVO

Modelo SL60CADB


"SAN JOR"

Características Generales



- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 2 puertas laterales con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puertas con cordón de silicona
- 2 puertas internas de vidrio (visibilidad 100%)
- Aireador en la parte superior
- Programación de Tiempo y Temperatura
- Controlador Digital PID Ecologic Sistema BLAST c/autotuning
- Rango de temperatura de 0°C a 80°C (amb. +5° a 80°C)
- Rango de Tiempo hasta 99 hs 59 min
- Decrece el tiempo a partir de llegar a la temperatura programada
- Doble visor de Temperatura interna y Parámetro programado
- Alarma sonora por suba de temperatura y fin de ciclo
- Indicadores lumínicos de resistencia, alarma y autotuning
- Tecnología Sistema BLAST
- Exactitud: 0,1°C
- Volumen interno 96 litros
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 2 años con service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de garantía en la web
- Accesorios: 2 estantes tipo rejilla regulables (5 posiciones)

Rango de Temperatura

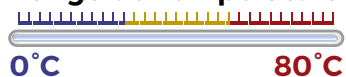

Medidas Internas

60 x 40 x 40

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior

Frente x Alto x Fondo en cm. 60 x 40 x 40
Volumen Interno (en Litros) 96

Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa 78 x 55 x 76
Frente x Fondo x Alto con Embalaje 82 x 60 x 82

Otros

Consumo en Watts 300
Peso en Kg Neto 44
Peso en Kg con Embalaje 46

- Alta performance para uso continuo
- Exclusivo Sistema BLAST
- Fácil manejo del Control Digital
- Autotuning optimizado de fábrica
- Alta Precisión
- Doble Garantía
- Service gratuito de por vida

Especialistas en fabricación de Estufas