


## CARACTERISTICAS GENERALES

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 1 puerta lateral con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Programación de Tiempo y Temperatura
- Control Digital PID EcoLogic con Autotuning
- Doble visor de temperatura Interna y Parámetro programado
- Decrece el tiempo a partir de llegar a la temperatura programada
- Rango de temperatura de 50 a 200 °C
- Indicadores lumínicos de Resistencia, Alarma y Autotuning
- Exactitud: al grado centígrado
- Conexión a 220 Vac. 50-60Hz.
- Garantía 1 año. Service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de Garantía a 2 años gratuita
- Accesorios: 1 estante tipo rejilla regulable (3 posiciones)



Medidas Internas  
**33 x 20 x 20**

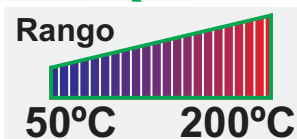

Estufa de Esterilización  
Automática Digital

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

<b>Interior</b>	
Frente x Alto x Fondo en cm	33 x 20 x 20
Volumen Interno (en Litros)	13
<b>Exterior</b>	
Frente x Fondo x Alto de Estufa	44 x 31 x 44
Frente x Fondo x Alto con Embalaje	48 x 36 x 48
<b>Otros</b>	
Consumo Wats	660
Peso en Kg Neto	11
Peso en Kg con Embalaje	12

- 😊 Alta performance para uso continuo
- 😊 Exclusivo Control Digital EcoLogic
- 😊 Fácil manejo del Control Digital
- 😊 Autotuning optimizado de fábrica
- 😊 Bajo Consumo
- 😊 Doble Garantía
- 😊 Service gratuito de por vida

[www.sanjour.com.ar](http://www.sanjour.com.ar)