


Modelo SL60S

CARACTERISTICAS GENERALES

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 2 puertas laterales con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puertas con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Termómetro empotrado en el frente
- Termorregulador hidráulico a capilar
- Indicadores lumínicos de Resistencia y funcionamiento
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Rango de temperatura de 30 °C a 200 °C
- Rango óptimo de trabajo de 90 °C a 200 °C
- Exactitud: +- 1,4% del valor final de temperatura
- Uniformidad: +- 1,5% del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60Hz.
- Garantía 1 año. Service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de Garantía (en la Web)
- Accesorios: 2 estantes tipo rejilla regulables (5 posiciones)



Medidas Internas
60 x 40 x 40

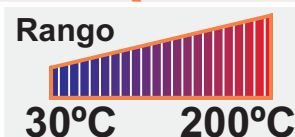

Estufa de Secado
para laboratorio

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Interior	
Frente x Alto x Fondo en cm	60 x 40 x 40
Volumen Interno (en Litros)	96
Exterior	
Frente x Fondo x Alto de Estufa	74 x 55 x 76
Frente x Fondo x Alto con Embalaje	82 x 60 x 80
Otros	
Consumo Wats	1400
Peso en Kg Neto	36
Peso en Kg con Embalaje	38

- 😊 Alta performance para uso continuo
- 😊 Bajo consumo
- 😊 Doble Garantía
- 😊 Service gratuito de por vida

www.sanjour.com.ar